

ZOLL AED 3™

빠른 시작 가이드



ZOLL®

환영합니다

세계에서 가장 진보한 AED인 ZOLL AED 3™을 귀하의 자동 체외식 제세동기로 선택해 주셔서 감사합니다. 아래의 간단한 지침에 따라 단 몇 분이면 AED 3을 설정할 수 있습니다. 설정을 마친 뒤 일련 번호를 기록하고 www.zollaed3.com에 로그인하여 AED 3을 등록하면 보증 기간이 연장됩니다.

문의 또는 우려 사항은 +1-978-421-9655로 ZOLL에 연락하거나, tservice_master@zoll.com으로 이메일을 보내거나, AED 3을 구입한 공인 판매처에 문의하십시오.

내용

문서 폴더:

- 빠른 시작 가이드
- PlusTrac™ 활성화 인증서
- ZOLL AED 3 구조 참조 가이드/포스터
- ZOLL AED 3 사용 설명서

내용물:

- ZOLL AED 3
- 문서 폴더
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3 배터리

AED 등록 완료

ZOLL 웹 사이트 www.zollaed3.com에 로그인하여 다음과 같이 하십시오.


- 보증 기간 2년 무료 연장 등록
- PlusTrac 구입 첫 해의 무료 이용 자격을 부여하는 PlusTrac 활성화 인증서*로 PlusTrac 계정 설정
 - AED 3 의 준비 상태 추적
 - 대응요원의 교육 상태 추적
 - AED 프로그램 온라인 관리
 - 이메일 및 경고 알림 받기
 - AED 3 의 자체 검사 결과를 로컬WiFi 네트워크를 통해 PlusTrac 에 정기적으로 보고하도록 허용
- ZOLL Case Review™ 에서 임상 이벤트 데이터를 업로드 및 관리하기 위한 ZOLL 온라인 계정의 설정 정보 수신

*활성화 인증서는 문서 폴더에 있음


ZOLL AED 3 설치




배송 포장에서 모든 내용물을 꺼내십시오.

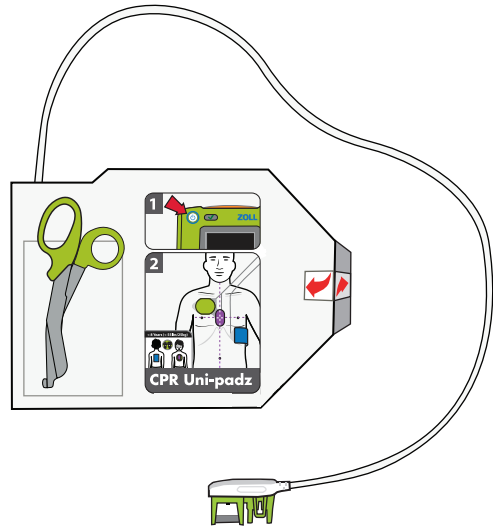


보호 상자에서 CPR Uni-padz를 꺼내십시오.

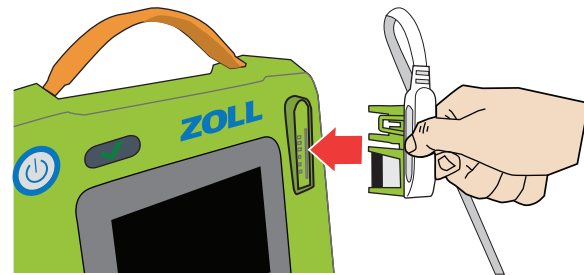


CPR Uni-padz 케이블 커넥터를 AED 3 전극 포트에 연결하십시오.

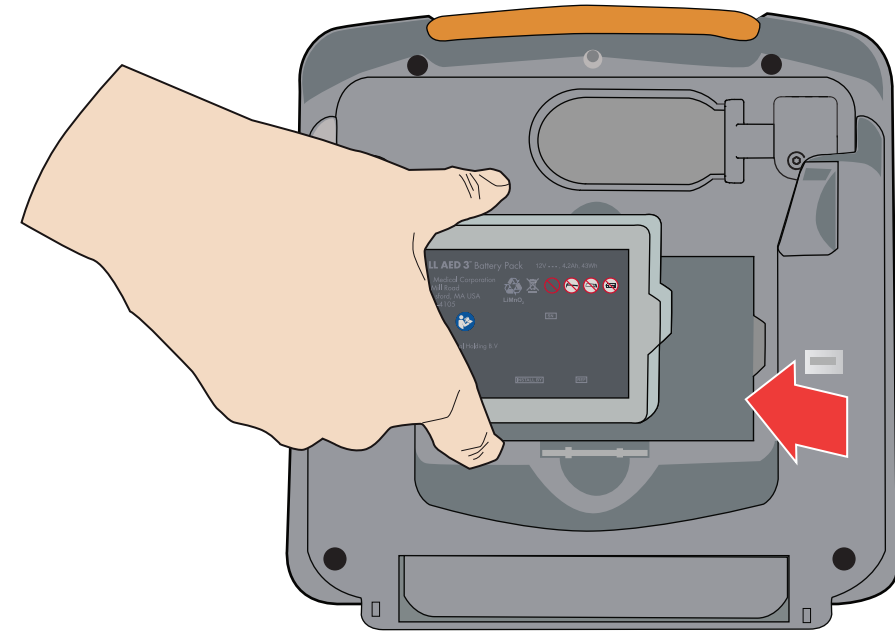

배송 포장에서 AED 3 배터리를 꺼내십시오. 라벨이 바깥쪽을 향하도록 배터리의 측면 탭을 잡으십시오. 딸깍 소리와 함께 배터리가 제자리에 고정될 때까지 배터리 끝부분의 홈을 배터리 칸의 해당 모양에 맞춰 AED 뒷면으로 밀어넣으십시오.

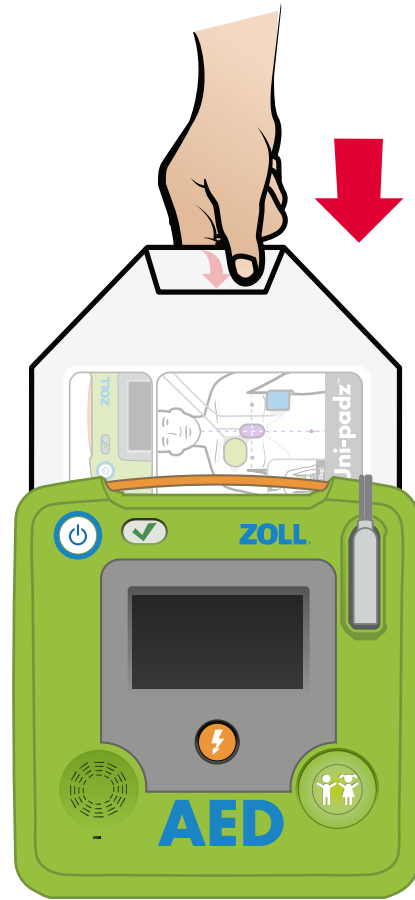

ZOLL AED 3 의 자동 자체 검사가 수행됩니다. 자체 검사가 진행되는 동안 패키지의 라벨이 사용자를 향하도록 하여 CPR Uni-padz 를 AED 뒷면에 삽입하십시오.

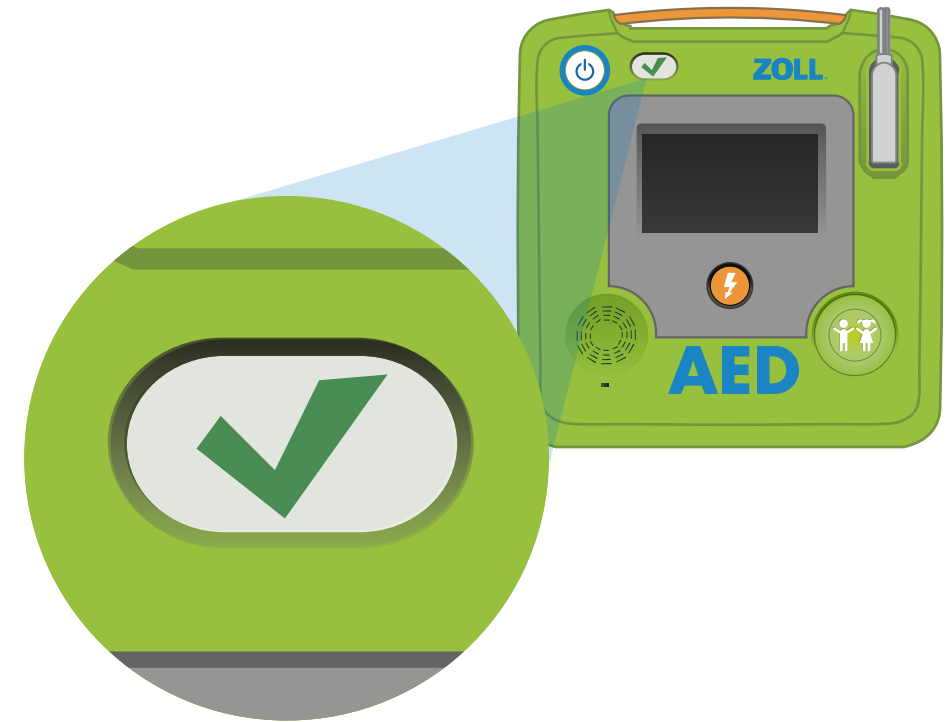

AED 3 자체 검사가 끝나면 "장치정상"라는 오디오 메시지가 들리거나 상태 표시기 창에 녹색 확인 기호가 표시되어 통과를 알립니다. 이제 AED 3을 사용할 준비가 되었습니다. 문의 사항은 문서 폴더에 있는 사용 설명서를 참조하십시오.

문의 사항:

ZOLL 기술 지원 서비스 또는 해당 지역의
공인 ZOLL 담당자에게 문의

ZOLL 기술 지원 서비스:

전화: +1-978-421-9655

이메일: tservice_master@zoll.com