

**ZOLL AED 3™**

# Snabbstartsguide



**ZOLL®**

# Välkommen

Tack för att du har valt ZOLL AED 3™ som automatiserad extern defibrillator – det är den mest avancerade defibrillatorn på marknaden idag. Följ de här enkla anvisningarna för att konfigurera din AED 3 på bara ett par minuter. När configurationen är klar ska du anteckna ditt serienummer och logga in på [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) för att registrera din AED 3 för en förlängd garanti.

Om du undrar över något kan du kontakta ZOLL på telefonnummer +1-978-421-9655 (USA) eller via e-post till [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com). Du kan även kontakta den auktoriserade distributör som sålde din AED 3.

# Innehåll

## Dokumentationsmapp:

- Snabbstartsguide
- PlusTrac™ aktiveringscertifikat
- ZOLL AED 3 referensguide/affisch för återupplivning
- ZOLL AED 3 bruksanvisning

## I förpackningen:

- ZOLL AED 3
- Dokumentationsmapp
- CPR Uni-padz™
- ZOLL AED 3 batteri

# Slutför AED-registreringen

Logga in på: [www.zollaed3.com](http://www.zollaed3.com) för att:


- Registrera dig för 2 års förlängd garanti utan kostnad
- Konfigurera ditt PlusTrac-konto med hjälp av ditt aktiveringscertifikat\* för PlusTrac som ger dig det första året med PlusTrac utan kostnad
  - Håll koll på defibrillatorns beredskapsnivå
  - Håll koll på räddningspersonalens utbildningsstatus
  - Hantera AED-programmet online
  - Få elektroniska påminnelser och varningsmeddelanden
  - Ställ in att AED 3-enheten regelbundet ska rapportera funktionstestresultat till PlusTrac via lokalt Wi-Fi-nätverk
- Ta reda på hur du ställer in ditt ZOLL Online-konto för överföring och hantering av kliniska händelser i ZOLL Case Review™

\*aktiveringscertifikatet medföljer i dokumentationsmappen


# Konfiguration av ZOLL AED 3




Ta ut allt innehåll ur leveranspaketet.

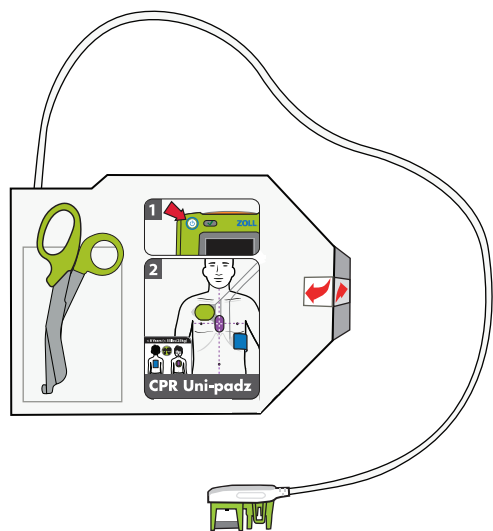


Ta bort CPR Uni-padz från den skyddande förpackningen.

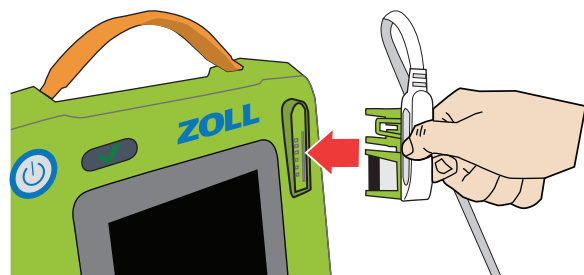


Sätt in kabelanslutningen för CPR Uni-padz i elektrodporten på AED 3.

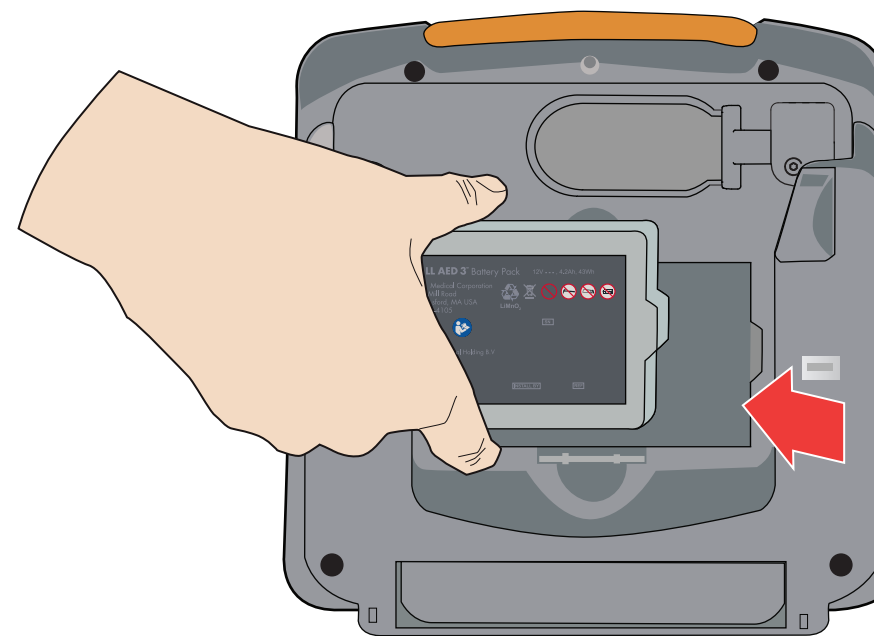

Ta ut AED 3-batteriet från leveransförpackningen. Greppa batteriet i kanterna och se till att etiketten är vänd utåt. Sätt in batteriet på baksidan av defibrillatorn så att den klickar på plats och den utskjutande delen i batteriets kant passar in i batterifackets form.

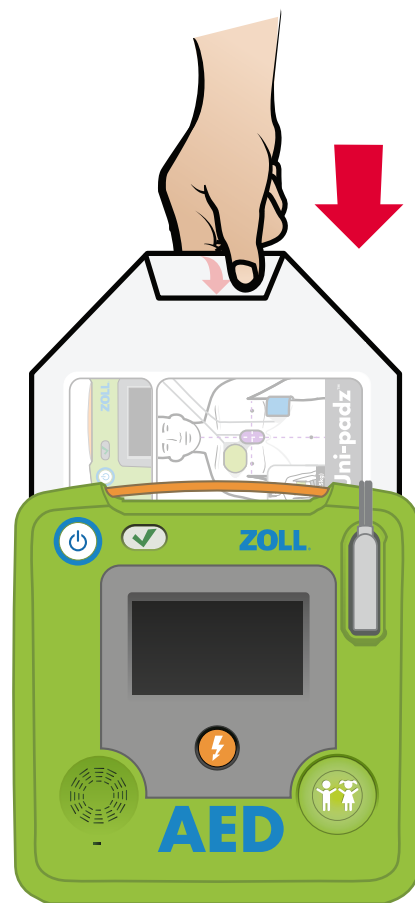

ZOLL AED 3 gör sedan ett automatiskt funktionstest. Medan funktionstestet pågår sätter du in CPR Uni-padz på baksidan av defibrillatorn med etiketten vänd mot dig.

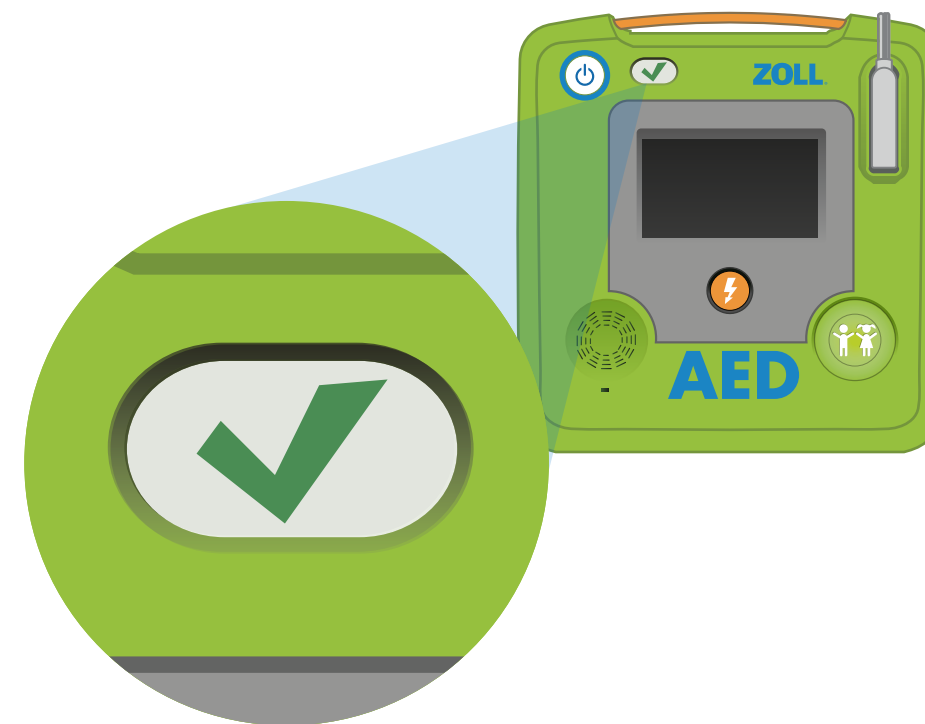

När AED 3-enhetens funktionstest är klart ska du kontrollera att testet lyckades genom att lyssna efter röstmeddelandet "Enheten är OK" eller se om det visas en grön bock i statusfönstret. AED 3-enheten är nu klar för användning. Läs bruksanvisningen som medföljer i dokumentationsmappen om du har frågor.

**Frågor:**

Kontakta ZOLL Technical Service eller en lokal auktoriserad ZOLL-återförsäljare

**ZOLL Technical Service:**

Telefon: +1-978-421-9655

E-post: [tservice\\_master@zoll.com](mailto:tservice_master@zoll.com)