

# AED Plus® Trainer2

## Accessori per l'addestramento



### Controllo completo della simulazione da parte dell'istruttore

L'AED Plus Trainer2 di ZOLL® consente agli istruttori BLS-D di mostrare agli operatori come salvare una vita con AED Plus. È possibile scegliere tra quattro scenari di soccorso pre-impostati oppure gestire manualmente l'intera operazione. Un telecomando wireless permette di controllare diversi Trainer2 AED Plus.

Con questo semplice telecomando, gli istruttori possono scegliere uno scenario e inviarlo al Trainer2 AED Plus in pochi secondi. Basta premere il tasto on-off del Trainer2 per iniziare. L'istruttore decide l'esito dell'analisi, cioè se è richiesto uno shock oppure no, se inviare messaggi relativi all'applicazione degli elettrodi e se l'unità Trainer2 deve consigliare "MAGGIORE COMPRESSIONE" o confermare "COMPRESSIONI ADEGUATE". Un tasto pausa consente all'istruttore di arrestare facilmente la simulazione per parlare con l'operatore per poi riprendere esattamente dal punto in cui si era interrotto.

### Linee guida 2010 AHA e ERC Ready

Il software Trainer2 passa facilmente dalle linee guida 2010 dell'AHA a quelle dell'ERC e viceversa.

### Il software AED Plus Trainer2 comprende tutto ciò di cui ha bisogno un istruttore

- AED Plus Trainer2 per addestramento
- Telecomando wireless
- Un elettrodo CPR-D-padz® Training
- Una serie di adesivi riutilizzabili per CPR-D-padz Training
- Quattro batterie D
- Due batterie AA
- Guida per l'operatore

## AED Plus Trainer2 Accessori



Telecomando AED Plus Trainer2 di ricambio  
Codice n. 8008-0007



Custodia AED Plus Trainer  
Codice n. 8000-0375-01



Manichino per dimostrazione AED Plus Trainer  
Codice n. 8000-0835-01

**ADVANCING  
RESUSCITATION.  
TODAY.®**

ZOLL Medical Corporation  
Worldwide Headquarters  
269 Mill Road  
Chelmsford, MA 01824  
978-421-9655 800-348-9011

Per gli indirizzi e i numeri di fax delle filiali  
e di altre sedi nel mondo, consultare il sito  
[www.zoll.com/contacts](http://www.zoll.com/contacts).

## Specifiche AED Plus Trainer2

**Dimensioni:** 13,3 cm A x 24,1 cm L x 29,2 cm P


**Peso:** 2,2 kg

**Alimentazione:** 4 batterie D (incluse) per  
AED Training (sufficienti per  
più di 100 ore di addestramento);  
2 batterie AA (incluse) per il  
telecomando; l'adattatore per  
rete fissa non è disponibile –  
utilizzo solo a batterie.



## Scenari di soccorso

Con questo semplice telecomando, gli istruttori  
possono impostare 5 diversi scenari

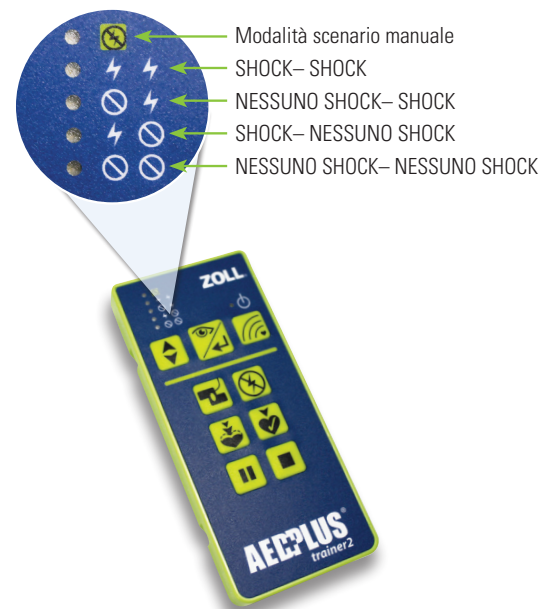

## Accessori AED Plus Trainer2

(I ricambi devono essere ordinati separatamente)



Gel adesivi di ricambio per elettrodi  
CPR-D-padz Trainer  
Codice n. 8900-0803-01



Elettrodi CPR-D-padz Trainer  
Codice n. 8900-0804-01



Elettrodi Stat-padz® II Trainer  
Codice n. 8900-0805-01  
(Confezione da 6pz)



Elettrodi Pedi-padz® II Trainer  
Codice n. 8900-000861-01  
(Confezione da 6pz)



Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

©2011 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. Advancing Resuscitation Today, AED Plus, CPR-D-padz, Pedi-padz, Stat-padz, e ZOLL sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Stampato negli Stati Uniti 061110 9656-0202-11

**ZOLL**